

Только для домашнего использования

# Руководство пользователя


## Массажный матрас ЭГО ComForte

# EG1600

Благодарим Вас за выбор массажного матраса ЭГО EG1600 ComForte, который призван улучшить Вашу жизнь, сделав её более комфортной. Пожалуйста тщательно прочитайте и изучите это руководство, для правильного использования и эксплуатации массажного матраса. Всегда сохраняйте данное руководство под рукой для удобства. Массажный матрас, в дальнейшем именуемый как массажер, предназначен только для домашнего использования.


### СОДЕРЖАНИЕ

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . 1
- СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ . . . . . 2
- ПОРЯДОК РАБОТЫ . . . . . 4
- ОБСЛУЖИВАНИЕ . . . . . 8
- УХОД И ХРАНЕНИЕ . . . . . 8
- РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ . . . . . 9
- СПЕЦИФИКАЦИЯ . . . . . 9
- ГАРАНТИЯ . . . . . 9

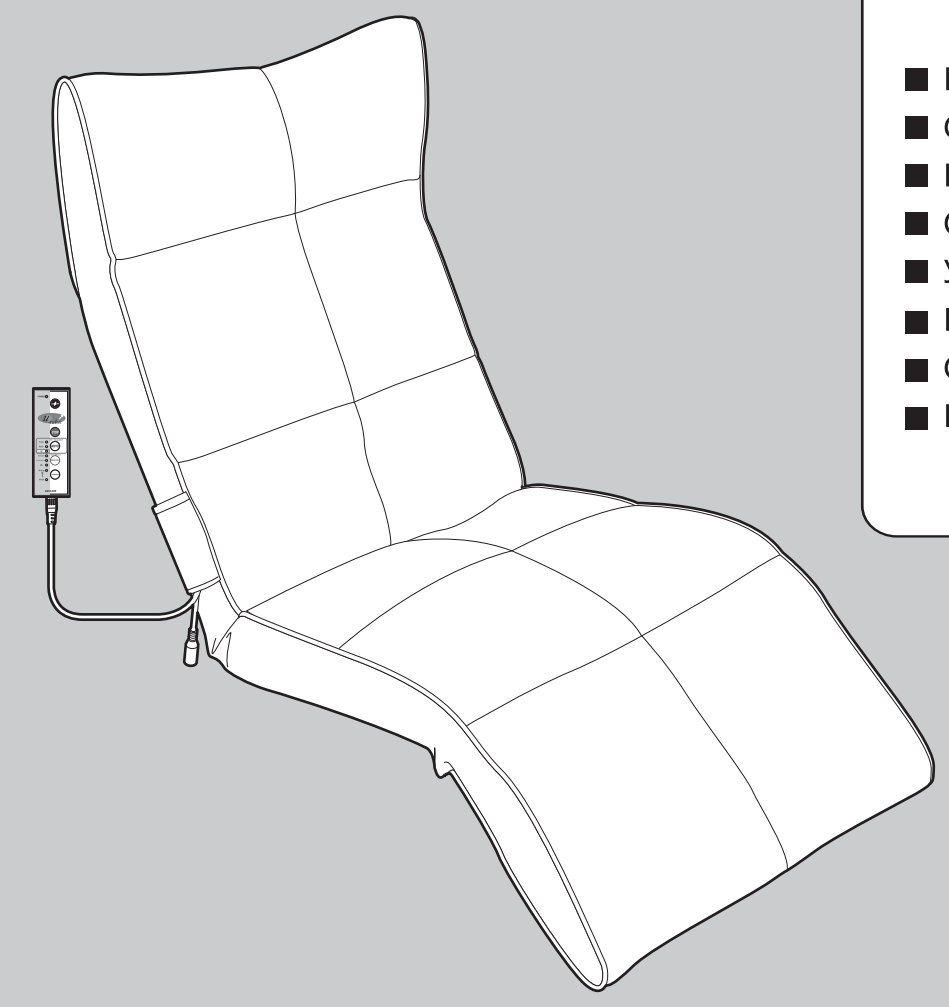

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **Пожалуйста, удалите пыль с помощью очищающей салфетки. Не очищайте массажер во время его работы. Иначе это может привести к его поломке.**
- **Очистите пульт с помощью мягкой ткани.**
- **Если массажер загрязнен, очистите его влажной тканью смоченной в воде или нейтральном моющем средстве. После этого протрите массажер сухой тканью.**
- **Не мойте массажер в воде и не допускайте разбрызгивания воды на его поверхность.**

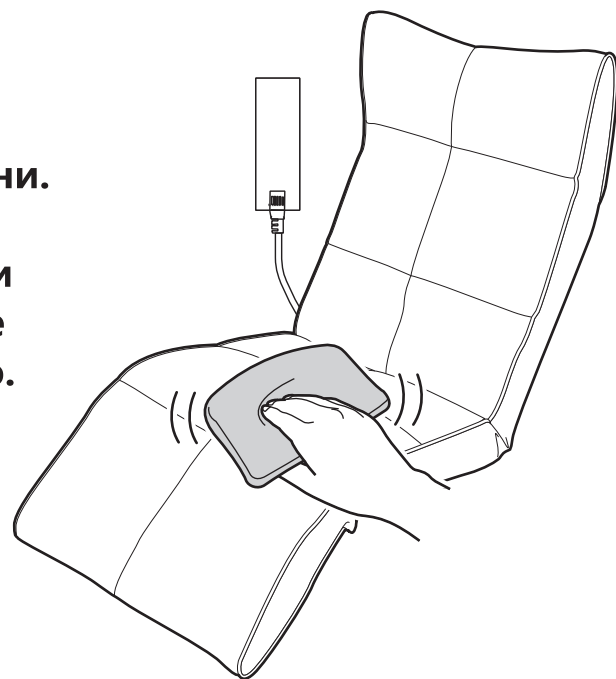

✳ **Не ремонтируйте и не разбирайте массажер самостоятельно**

### ⚠ Внимание

- ⊘ Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.
- ⊘ Не ремонтируйте и не разбирайте массажер самостоятельно

### ⚠ Предупреждение

- ⊘ Отключите массажер от питания перед очисткой.
- ⊘ Не очищайте массажер с помощью растворителя, бензина, спирта и других агрессивных жидкостей.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- **После использования, пожалуйста, очистите массажер тканью.**
- **Пожалуйста, накройте массажер, чтобы предотвратить попадание на его поверхность пыли.**
- **Не храните массажер в пыльном месте с высокой температурой и влажностью. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Пожалуйста убедитесь, что Вы внимательно прочитали это руководство, чтобы уменьшить риск возникновения нежелательных ситуаций.**
- **Неправильная эксплуатация может привести к травмам или несчастным случаям. Пожалуйста, используйте массажер в соответствии с данным руководством.**

### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Следующие лица должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажера:**



- Кто имеет кардиостимулятор или аналогичное имплантированное медицинское устройство
- Кто страдает от болезни сердца
- Кто имеет ненормальное физическое развитие или искривление позвоночника
- Кто имеет злокачественную опухоль
- Женщины во время менструации или беременности
- Кто проходит медицинское или парамедицинское лечение
- Кто имеет травмы или заболевания позвоночника

### ⊘ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не используйте массажер, если его поверхность повреждена или в случае возникновения механического или электронного сбоя. Обратитесь к своему дилеру для проверки или ремонта. Не трясите и не роняйте массажер. Не используйте и не храните массажер в условиях высокой влажности и температуры, например, в ванной, возле обогревателя и т. д. Иначе это может привести к несчастному случаю или короткому замыканию. Не используйте массажер вместе с другими устройствами. Не используйте массажер без наружного чехла. Не допустимо применять медицинские или косметические крема во время использования массажера. В случае возникновения проблем, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или к дилеру. Не пытайтесь отремонтировать массажер самостоятельно. Этот массажер не является медицинским прибором и им невозможно заменить полноценный курс лечения. Не вставайте на массажер и не оказывайте на него большую нагрузку. Не очищайте массажер с помощью бензина, растворителя или спирта. При возникновении неисправности массажера, отключите его от сети питания. В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме. Размещайте массажер на ровной горизонтальной поверхности, чтобы предотвратить его падение.


# СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

## Основной корпус

### Аксессуар: Адаптер питания

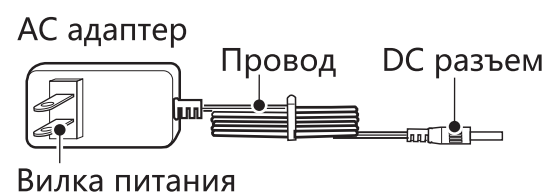

• Пожалуйста, убедитесь, что подголовник находится в правильном положении. Вид с лицевой стороны, подголовник можно сложить вперед.

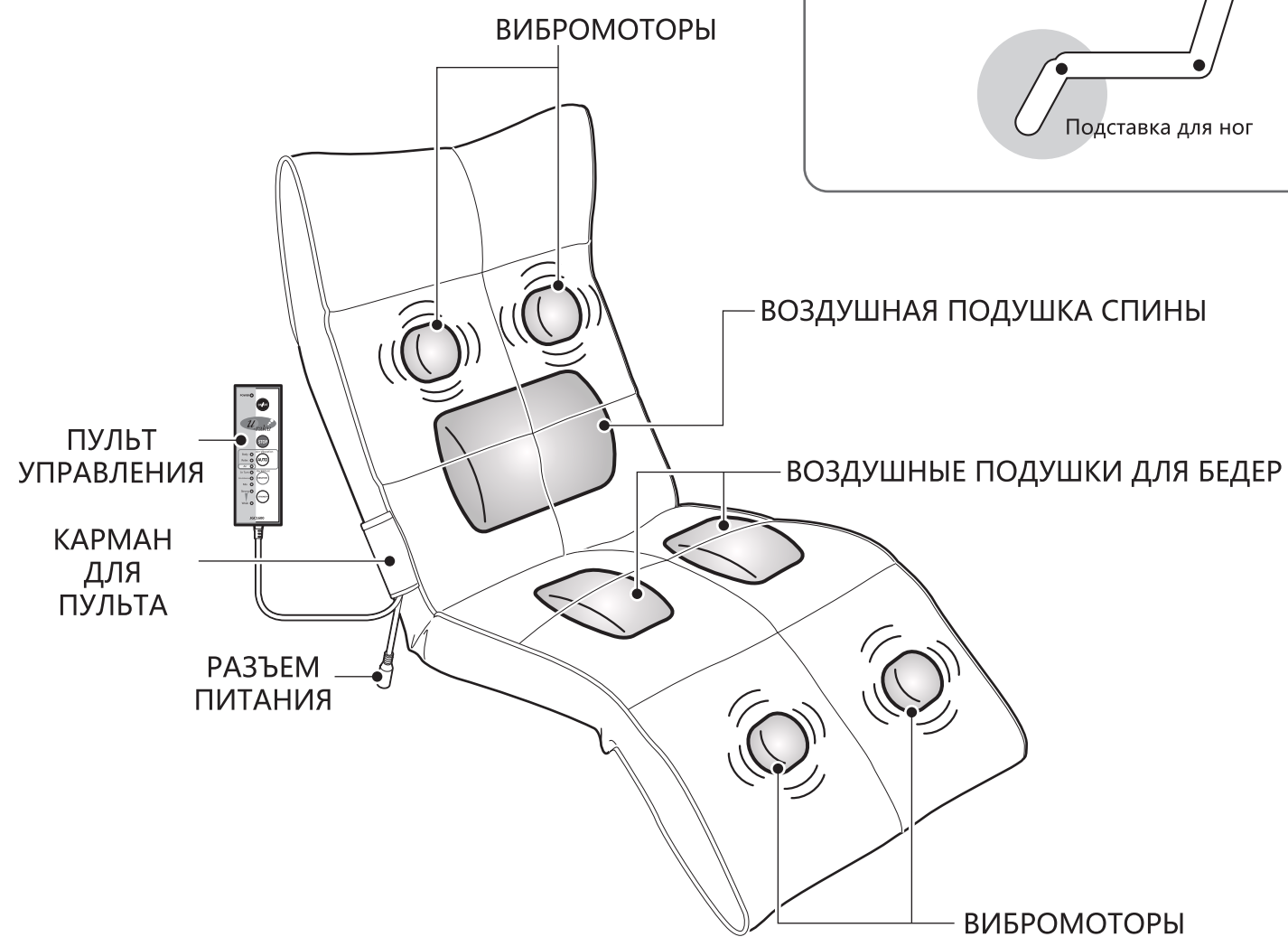

### ⚠ Внимание

! Адаптер питания переменного тока может использоваться только с этим массажером. Пожалуйста, не используйте его с другим оборудованием.

### ⚠ Предупреждение

⊘ Не рвите и не царапайте внешний чехол массажера, выполненный из жесткого материала. Это может привести к травме.

## 5 Таймер

- Время одного сеанса массажа 10 минут.
- Массажер автоматически выключится после 10 минут.


Если Вы хотите закончить массаж, нажмите кнопку **СТОП**

### ⚠ Предупреждение

! Время сеанса массажа 10 минут. Не используйте массажер более 30 минут в день. Иначе это вызовет дискомфорт. Если Вы изменили режим массажа в течении сеанса, отсчет времени таймера сбрасывается и начинает новый отсчет времени 10 минут.

## 6 Отключение адаптера питания от массажера

- 1 Отключите адаптер питания от сети.
- 2 Отключите штекер адаптера питания от разъема массажера.

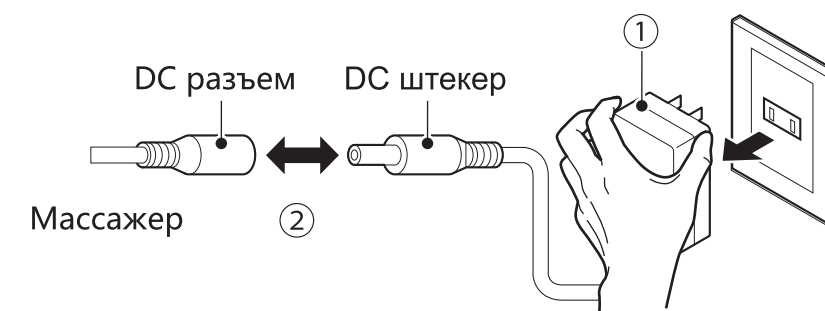

### ⚠ Внимание

! Адаптер питания может использоваться только с данным массажером. Пожалуйста, не используйте его с другими устройствами.




После окончания массажа отключите массажер от сети. Не тяните за шнур питания при отключении массажера. Пожалуйста, удерживайте вилку адаптера при отключении от сети. Иначе это может сломать адаптер или привести к поражению электрическим током и травме.

# Функции кнопок

4

- 1 **Вкл/Выкл** Нажмите эту кнопку включения массажера.
- 2 **АВТО** **Вибрация** Нажмите эти кнопки для выбора предпочтительного режима массажа.
- 3 **СИЛА ВИБРАЦИИ** Нажмите эту кнопку для выбора сильной или слабой вибрации.
- 4 Для окончания массажа нажмите кнопку **Вкл/Выкл**

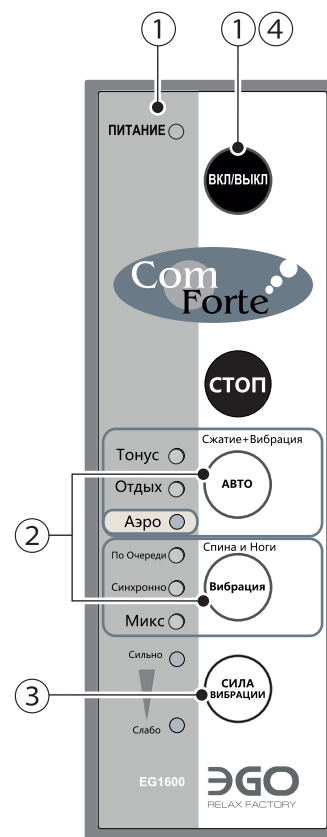

## Предупреждение

Запрещается одновременное нажатие нескольких кнопок на пульте управления.

<b>АВТО режим</b>	<b>Воздушно-компрессионный + вибрационный массаж</b>
Тонус	Массаж выполняется от спины к ногам
Отдых	Легкий релаксационный курс массажа
Аэро	Компрессионный массаж спины и бедер для снятия напряжения в мышцах
<b>Режим Вибрация</b>	<b>Вибрационный массаж</b>
По очереди	Вибромассаж спины и ног выполняется по очереди
Синхронно	Вибромассаж спины и ног выполняется одновременно
Микс	Совмещает оба режима вибрации вместе

## Пульт

### Индикатор

При включении массажера индикатор загорается

### Вкл/Выкл


Начинает / Останавливает массаж

### Стоп

Останавливает массаж

### Сила вибрации

Сильная/Слабая

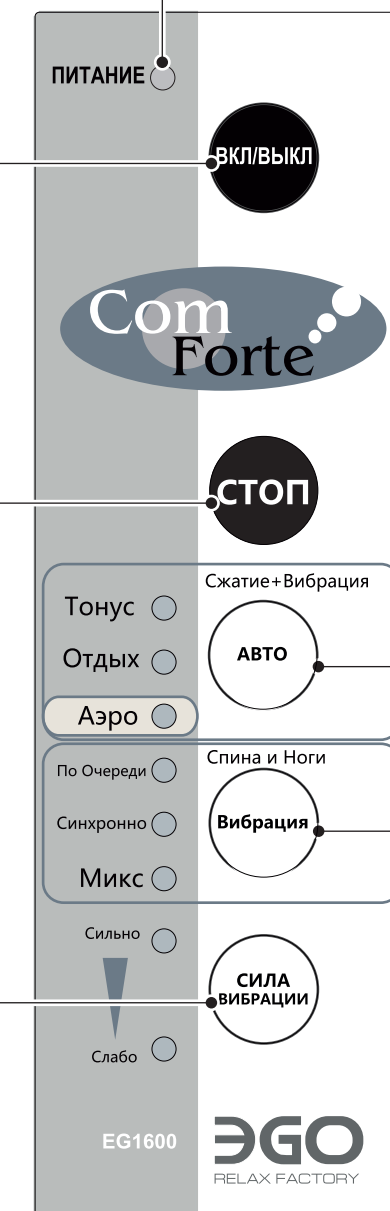

### Режим: Авто

- Тонизирующий массаж
- Расслабляющий массаж
- Активация воздушного массажа


### Режим: Вибрация

- По очереди спина и ноги
- Синхронно спина и ноги
- Смешивание 2 режимов



# ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1** Прежде чем использовать массажер, убедитесь, что он размещен на ровной горизонтальной поверхности.

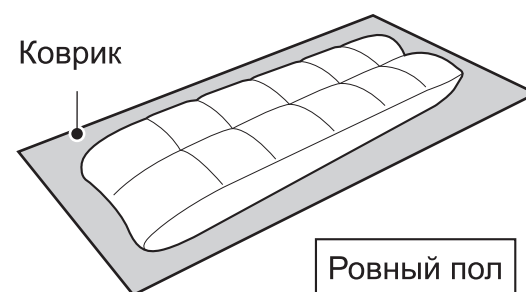

## ⚠ Предупреждение

- ❗ Этот массажер предназначен для использования одним человеком
- 🚫 Не используйте массажер вблизи открытого огня или во время курения  
Это может привести к пожару или травме.  
**Оберегайте массажер от прямых солнечных лучей**  
Это может привести к потере цвета или ухудшению тканевого покрытия.  
**Избегайте прямого контакта кожи с обивкой**

- 2** Пожалуйста используйте адаптер для питания массажера

- 1 Подключите штекер от адаптера питания к разъему массажера
- 2 Подключите адаптер в сеть питания



## ⚠ Внимание

- ❗ Адаптер питания может использоваться только с данным массажером. Пожалуйста, не используйте его с другими устройствами.




После окончания массажа отключите массажер от сети. Не тяните за шнур питания при отключении массажера. Пожалуйста, удерживайте вилку адаптера при отключении от сети. Иначе это может повредить адаптер или привести к поражению электрическим током и травме.

- 3** Изменение угла наклона


• Вы можете настроить желаемый наклон спинки, подголовника и ног.

### Спинка

Отклоняйте спинку от 1 до 14 позиции. В процессе отклонения Вы услышите кликающие звуки. Прекратите перемещение когда достигнете нужного угла наклона.

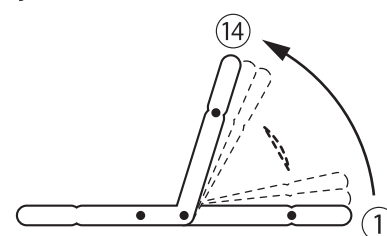


Поднимите спинку в максимально вертикальное положение. Затем нажмите вперед, чтобы опустить спинку, возвратив ее в оригинальное положение.

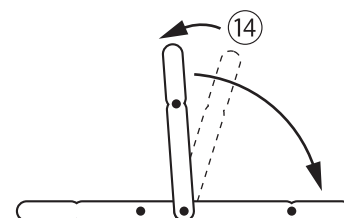


### Подголовник

Отклоняйте подголовник от 1 до 14 позиции. В процессе отклонения Вы услышите кликающие звуки. Прекратите перемещение когда достигнете нужного угла наклона.

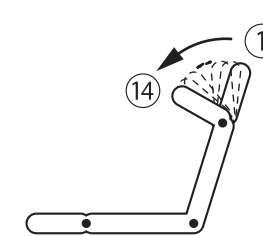


Отклоните подголовник в максимально вертикальное положение. Затем нажмите вниз, чтобы поднять его в оригинальное положение.

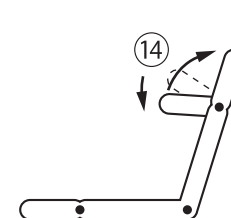


### Подставка ног

Отклоняйте подставку ног от 1 до 14 позиции. В процессе отклонения Вы услышите кликающие звуки. Прекратите перемещение когда достигнете нужного угла наклона.

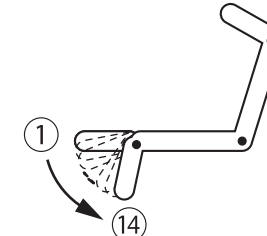

Отклоните подставку ног в максимально вертикальное положение. Затем нажмите вниз, чтобы поднять подставку ног, возвратив ее в оригинальное положение.

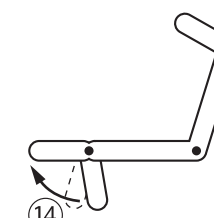

## ⚠ Внимание

- ❗ Будьте осторожны при настройке наклона массажера, чтобы не задеть людей, животных или мебель

## ⚠ Предупреждение

- 🚫 **Оберегайте массажер от контакта с огнем и обогревательными приборами. Не курите во время использования массажера**  
Это может стать причиной поломки или травмы.  
**Не оказывайте большую нагрузку на массажер при настройке угла его наклона**  
**Не садитесь на массажер если настройка наклона не завершена**  
Иначе это приведет к падению массажера или травме головы.

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Массажер не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание не подключено</li> <li>• Отсоединен адаптер</li> <li>• Кнопка питания выключена</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вставьте вилку в розетку</li> <li>• Подключите адаптер</li> <li>• Включите кнопку питания</li> </ul>
Массаж прекратился	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сеанс массажа закончился</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перезапустите массажер после перерыва 30 мин</li> </ul>
Массажер шумит во время массажа	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Воздушные подушки надуваются/сдуваются</li> <li>• Вибромоторы вибрируют</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Это нормально и никаких действий не требуется</li> <li>• Положите массажер на ковер, что уберет шум</li> </ul>

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание	Массажный матрас ЭГО ComForte
Модель	EG 1600
Входное напряжение	AC 100-220 В, 50-60 Гц
Выходное напряжение	DC 12 В
Мощность	20 Вт
Таймер	10 минут
Габариты	1550 x 550 x 120 мм
Вес	9.5 кг
Материал обивки	Полиуретан
Длина провода пульта	1 м
Длина провода питания	1.75 м
Рекомендовано	Рост до 185 см и вес до 100 кг

## ГАРАНТИЯ

Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером при обнаружении неисправности. В течение года после первоначальной покупки массажера, ремонт предоставляется бесплатно в случае обнаружения дефектов. Гарантия не распространяется на неисправности или ущерб, причиненные в результате неправильной эксплуатации или повреждения шнура и разъема питания.