



Инструкция / Manual breo iDream 1260

Обеспечивая интеллектуальный контроль давления воздуха с применением микрокомпьютера, массажер iDream1260 способствует притоку кислорода к головному мозгу, глазам и активировать энергетические каналы посредством массажа головы и глаз; он воздействует на голову и глаза как горячий компресс, а также производит вибромассаж, улучшая циркуляцию крови и тем самым снижая внутричерепное и внутриглазное давление, общую усталость и усталость глаз, улучшает обмен веществ и поддерживает здоровье головного мозга.




Содержание упаковки


В комплект массажера входит: массажер, пульт управления, адаптер, аккумулятор, руководство пользователя и наушники.ит успокаивающую музыку для снятия стресса и ощущения тревожности.




Основной прибор

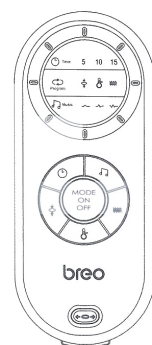

Блок питания

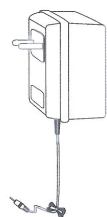


Адаптер

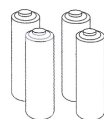

Аккумулятор (AAx4)




Руководство

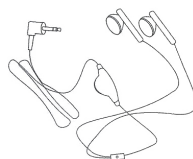


Наушники

Функции

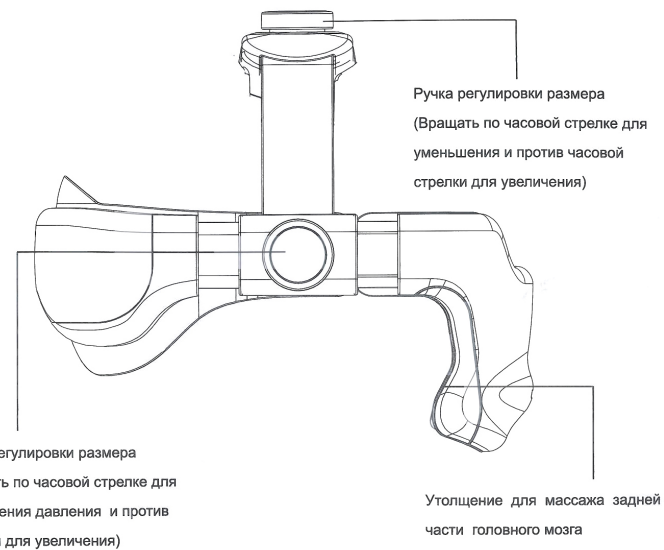

Функции

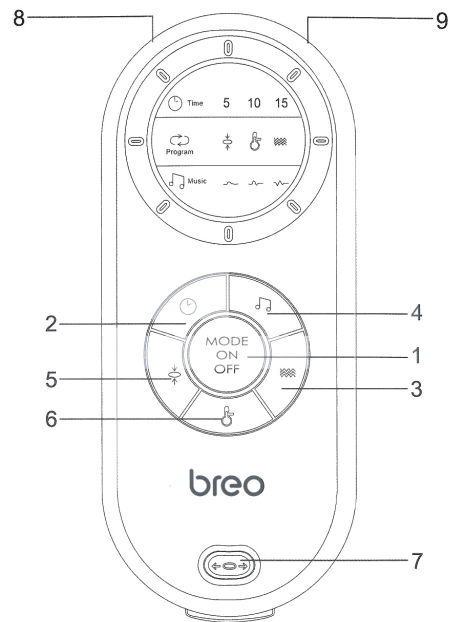

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Кнопка «Питание/Режим» | 6. Кнопка функции горячего компресса |
| 2. Кнопка установки времени | 7. Клапан сброса давления воздуха |
| 3. Кнопка функции вибрации | 8. Гнездо для подключения наушников |
| 4. Кнопка музыкальной функции | 9. Гнездо соединения адаптера постоянного тока |
| 5. Кнопка функции воздушного массажа | |

Подготовка к работе

Использование адаптера питания

1. Применяйте обычные аккумуляторы номиналом 6 В постоянного тока, поставляемые нашей компанией.
2. Вставьте вилку адаптера питания в гнездо питания на контроллере.
3. Соедините адаптер питания с сетью.

Примечание:

1. Проверьте полярность аккумуляторов, и убедитесь, что крышка отсека закрыта. Полярность аккумуляторов указана внутри отсека. Рекомендовано использовать щелочные аккумуляторы.
2. Пожалуйста, вынимайте аккумуляторы, если Вы используете адаптер.


Настройка

Стандартный режим

Время массажа в стандартном режиме составляет пятнадцать минут при установках по умолчанию для музыкальной функции, давления воздуха в состоянии цикла и функции горячего компресса с низкой температурой. Имеются кнопки настройки.


Кнопка изменения давления воздуха

Коротким нажатием на кнопку выбора режима давления переключите уровень давления в следующем порядке. Только для массажа глаз длительно нажмите на кнопку выбора режима давления в течение двух секунд, чтобы отключить подачу давления в область головы. Повторное длительное нажатие в течение двух секунд на кнопку выбора режима давления включит подачу давления в область головы и для массажа. Только для массажа глаз длительно нажмите на кнопку выбора режима давления на две секунды для отключения.

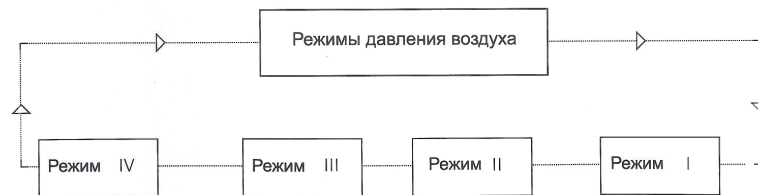

Кнопка музыкальной функции

Нажмите кнопку выбора музыки для изменения мелодии. Повторно нажмите и удерживайте для остановки проигрывания.

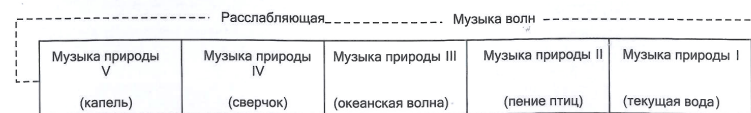


Установки


Time Button / установка времени массажа




Hot Compressing / режим горячего компресса

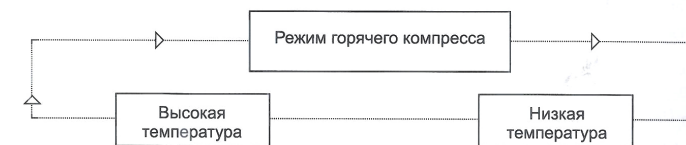

Vibration Button / режим вибрации

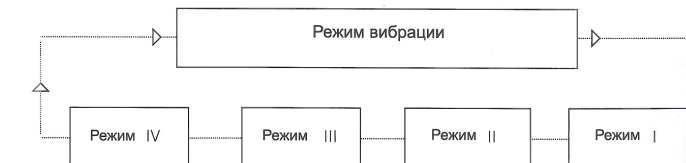

Mode Button / переключение режимов

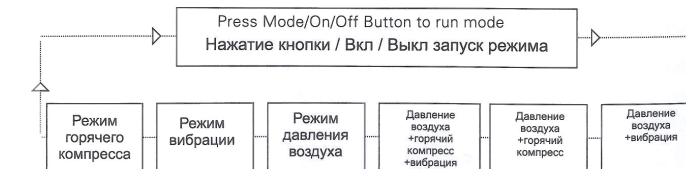

Меры предосторожности

1. Следуйте предписаниям о мерах предосторожности и примечаниям для успешной работы с массажером.
2. Люди, страдающие от заболеваний головного мозга или перенесшие операции на головном мозге, не должны использовать массажер.
3. Снимите контактные линзы, выньте шпильки и украшения из волос перед применением массажера.
4. Не производите очистку прибора водой. Если прибор требует очистки, протрите его хлопчатобумажной тканью, смоченной в спиртосодержащей жидкости.
5. Не прикасайтесь к шнуру питания при использовании массажера. Не разбирайте прибор самостоятельно.
6. Наденьте прибор непосредственно перед использованием во избежание повреждения воздушной подушки из-за чрезмерного давления.
7. Не используйте прибор в окружающей среде с высокой температурой и влажностью.
8. Оберегайте массажер от воздействия прямых солнечных лучей и агрессивных газообразных сред.
9. Не выходите на улицу и не управляйте транспортным средством во время использования массажера.
10. Пожалуйста, вынимайте аккумуляторы, если вы используете адаптер. Во избежание утечек электролита извлекайте аккумуляторы, если вы не планируете использовать массажер в течение длительного времени.

Выявление неисправностей и технические условия

Следуйте процедурам, описанным ниже для проверки наличия возможных неисправностей. Если, тем не менее, проблема не может быть решена, или продукт все так же не функционирует, отключите кабель питания и свяжитесь с нашим сервисным центром. Не разбирайте и не пытайтесь чинить прибор самостоятельно!

Неисправность	Причина	Решение
Массажер не включается	Проверьте состояние кабеля	Проверьте соединение кабеля
	Проверьте напряжение аккумуляторов	Если напряжение низкое, замените аккумуляторы
	Проверьте, правильно ли установлены аккумуляторы	- Убедитесь, что полярность аккумуляторов соблюдена - Убедитесь, что аккумуляторы установлены и закреплены в отсеке
	Убедитесь, что адаптер питания подсоединен правильно	Убедитесь, что соединения соблюдены
Низкое давление воздуха и слабая вибрация	Проверьте напряжение аккумуляторов	- Если напряжение низкое, замените аккумуляторы - Убедитесь, что аккумуляторы установлены и закреплены в отсеке

ПИТАНИЕ

6W постоянного тока

Оптимальная температура рабочего окружения: +5 C до +40 C

Мощность: 6W

Относительная влажность <= 80%

Размеры массажера: длина 232 мм x ширина 278 мм x высота 243 мм

Вес нетто: 880 г