

iRestTM

SL-T102 Массажное кресло

iRestTM

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ



iRestTM

Поставщик товаров торговой марки iRest на территории России
ООО "ТРГ"
тел.: +7 842 354 56 36
e-mail: irest@bk.ru

ИНСТРУКЦИЯ - ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ТРГ

www.ru-irest.ru e-mail: irest@bk.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Прежде всего, благодарим вас за покупку массажного кресла. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом использования кресла и четко следуйте ее указаниям. Обратите особое внимание на меры предосторожности и сохраните данную инструкцию для будущего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	02
Наименование компонентов	04
Функции и предназначение	05
Инструкция по эксплуатации	06
Примечания	10
Спецификация продукта	12

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям данного прибора.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой, чтобы избежать его повреждения.
- При использовании кресла, следуйте данной инструкции.
- Используйте с креслом только рекомендованные приспособления.
- Не используйте кресло вне помещений.
- Используйте кресло только по назначению так, как указано в инструкции.
- Никогда не пользуйтесь прибором, если у него поврежден шнур или штепсель, если он работает неправильно, если он был поврежден, если его уронили или если он побывал в воде.
- Не используйте прибор, если вас клонит в сон, а также находясь в нетрезвом состоянии.
- Не рекомендуется использовать кресло менее чем через час после приема пищи.
- Не используйте прибор в случае повреждения покрытия (обнажился встроенный механизм).
- Используйте кресло только при правильном заземлении.
- Не используйте кресло в тесном, плохо проветриваемом помещении, в помещении с высокой температурой или с повышенной влажностью.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕСЛОМ.

- Лицам, страдающим от сердечной недостаточности, а также носящим на себе электронные медицинские приборы.
- Лицам с высокой температурой.
- Лицам с диагнозом остеопороз.
- Беременным женщинам и женщинам в период менструации
- Лицам, проходящим лечение или испытывающим недомогание следует перед использованием проконсультироваться у врача.
- Если недомогание или боль возникли во время использования кресла, необходимо немедленно остановить массаж и проконсультироваться у врача.

Уважаемый покупатель!

Компания "TRG" благодарит Вас за лучший выбор. Производитель массажных кресел китайская компания "iRest" имеет Сертификат Соответствия, все кресла "iRest" одобрены для использования Министерством здравоохранения Китая.

Компания "TRG" гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии _____ со дня покупки. Данным Гарантийным Сертификатом компания "TRG" берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.

В случае, если Ваше кресло по каким-либо причинам Вам не подходит Вы можете его вернуть или обменять в 14-дневный срок при условии сохранения рабочего состояния, товарного вида, упаковки и документов!

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - * правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата;
 - * наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки.
2. Компания «TRG» оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в случае непредставления вышеуказанных документов или информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта и даты приобретения изделия.
3. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание.
5. Компания «TRG» не отвечает за недостатки Товара в следующих случаях:
 - а) Использования Товара, предназначенного для личных (бытовых, семейных) нужд, для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих назначению Товара;
 - б) Нарушения правил и условий эксплуатации, установки Товара, указанных в инструкции по эксплуатации;
 - в) Если на Товаре повреждены пломбы, имеются следы вскрытия, нарушения целостности Товара или следы попыток ремонта Товара при отсутствии подтверждения предварительного извещения Потребителя об обнаружении недостатков качества Товара;
 - г) Если недостатки качества вызваны внесенными в конструкцию или схему товара изменениями, которые не предусмотрены изготовителем;
 - д) Если недостаток Товара стал следствием действия непреодолимой силы, несчастного случая, умышленных или неосторожных действий (бездействия) Потребителя или третьих лиц;
 - е) Возникновения недостатков вследствие воздействия на Товар, а равно проникновения внутрь вещества, материалов, жидкостей, насекомых;
 - ж) Подключения Товара к сети или источнику электрического питания, параметры электрической энергии которых не соответствуют действующим в Российской Федерации техническим регламентам, а равно в случае возникновения недостатков по причине временного отклонения параметров электрической энергии от требований вышеуказанных регламентов (перепад напряжения и т.п.)
6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных Вам действующим законодательством Российской Федерации.
7. В случае наличия исправления, гарантийный талон считается не действительным.





Гарантийный Сертификат

Наименование изделия:

Страна происхождения: КИТАЙ

Серийный номер:

Дата покупки: .. в .. 20 .. г.

Подпись продавца:

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Обращайтесь к официальному представителю
компании «ТРГ» в вашем регионе.

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф. И. О.:

Адрес:

ТЕЛЕФОН:

Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии.

Претензий по внешнему виду изделия не имею, с условиями гарантии
ознакомлен.

Подпись покупателя:

Место продажи:

Место для печати:

- Тем, у кого имеется искривление позвоночника.
 - Людям с кожными заболеваниями.
 - Детям до 12 лет, не умеющим правильно обращаться с прибором.
 - Для массажа головы, колен или в области живота.
 - Укрываясь одеялом или подушкой. Повышенная температура может стать причиной пожара, электрического шока или травмы.
- ### БЕЗОПАСНОСТЬ.
- Используйте только подходящую к штепселю розетку.
 - Не пытайтесь включить \выключить кресло из сети влажными руками. Вы можете получить травму или электрический шок.
 - Не используйте влажную тряпку при чистке электронных частей прибора.
 - Оберегайте прибор от воздействия высокой температуры, огня или прямых солнечных лучей.
 - Не забывайте отключать кресло от питания каждый раз после использования.
 - Чистите кресло только сухой тряпкой, не используйте растворы, содержащие ацетон, бензин или спирт.
 - Не толкайте и не передвигайте кресло на колесиках по неподходящей поверхности. Приподнимите и перенесите его.
 - Следите за тем, чтобы индивидуальный сеанс работы кресла не длился слишком долгое время.
 - Старайтесь не повредить шнур, не тяните его с силой, не скручивайте, не складывайте. Повреждение шнура может вызвать электрический шок.
 - Если массажное кресло вышло из строя, немедленно отключите его и обратитесь в сервисный центр.
 - При отключении электроэнергии нажмите кнопку "off", затем выньте штепсель из розетки. В противном случае при включении электроэнергии может возникнуть опасность.
 - Никогда ничего не засовывайте в отверстия.
- ### ПРИМЕЧАНИЯ
- При работедвигающиеся механизмы кресла издают специфические звуки.
 - Если панель управления выключена, проверьте - включен ли прибор в сеть.
 - Если установленное время массажа вышло, сработает система автоматического выключения работы прибора.
 - При слишком длительном использовании кресла датчик температуры автоматически выключит работу прибора. Вы сможете снова использовать кресло после получасового перерыва.

НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ



- 1.Подушка
- 2.Накидка спинки кресла
- 3.Воздушные подушки
- 4.Накидка
- 5.Отделение для ног
- 6.Мини-столик
- 7.Подлокотник
- 8.Кожух спинки кресла
- 9.Сетевой шнур и разъемы питания
- 10.Разъем для предохранителя
- 11.Разъем соединения
- 12.Разъем для штепсельной вилки
- 13.Панель управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SL-T102

Наименование: Массажное кресло с купюроприемником

Входное напряжение: AC220-240V
50/60Hz



Мощность: 180W

Безопасность: Тип I

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. Защита пола.

Длительное использование кресла на деревянном полу может повредить пол. Во избежание этого используйте ковер или другое покрытие.

Предостережение: Не передвигайте кресло с помощью колесиков по деревянному полу, земле или в узком пространстве. Поднимите кресло для перемещения.



ФУНКЦИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Функции

- Кресло снабжено функцией трехмерного сканирования индивидуальных особенностей вашего тела, что позволяет ему автоматически приспособиться к форме вашего тела. В подлокотнике кресла находится встроенный купюроприемник.

- Массаж осуществляется с помощью четырехколесного роликового механизма, который при прокатывании вверх-вниз по спине производит 5 видов массажа: Шицу, разминание, похлопывание, постукивание, синхронное похлопывание и разминание.

- Для области верхней части тела предусмотрены 3 модели массажа: автоматический массаж шеи и плеч, автоматический массаж верхней части тела, массаж спины и поясницы.

- В ручном режиме - возможность выбора области массажа, включая общий массаж верхней части тела, частичный массаж верхней части тела и точечный массаж заданной области. Каждый из указанных массажей предусматривает 5 уровней скорости. В режиме похлопывания, Шицу и постукивания вы можете установить широту воздействия массажа, а именно: Широкий, Средний и Узкий.

- Функция воздушного массажа нижней части тела обеспечивается воздушными камерами (3 - в области ягодиц, 8 - в отделении для ног) с изменяющейся интенсивностью надавливания от сильной к слабой.

- Спинка и отделение для икр обладают функцией откидывания и автоматического возврата в исходное положение. Возможность откидывать спинку как совместно с отделением для ног, так и отдельно от него.

- Кресло оснащено жидкокристаллическим дисплеем и встроенным в правый подлокотник пультом управления, с возможностью настройки параметров массажа и приема купюр.

- Кресло автоматически начинает работу после введения купюры в купюроприемник.

Предназначение

- устраняет усталость
- облегчает боль в мышцах
- снимает напряжение в мышцах
- снимает нервную и мышечную усталость

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ




НАСТРОЙКА ПЕРЕМЕТРОВ




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Регулировка и применение накидки и подушки кресла. Вы можете использовать или снять накидку, которая может ослабить действие массажа шеи и плеч способом растирания, по вашему усмотрению (рекомендовано использовать накидку). Накидка кресла присоединяется к спинке кресла при помощи молнии(1). Подушка присоединяется к накидке при помощи липучки(2)

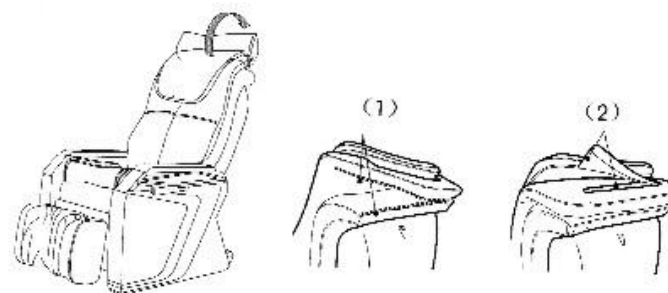

6. Установки мини-столика
(1) Установите на кресло подставку под мини-стол (5) поставьте мини-стол на подставку (2).

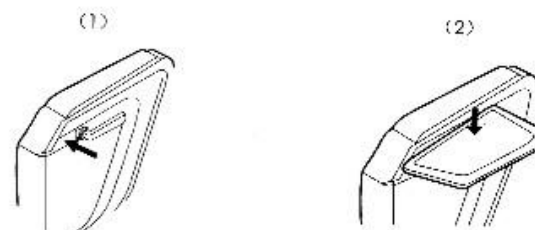

4. Примечания.

Прием купюр	Принимает купюры 4х различных достоинств
Время приема купюр	Примерно 2 сек.
Условия эксплуатации	Темп. При эксплуатации: 0 - 55°C Темп. Хранения: -20-60°C Влажность: 30% - 85% ОВ(без конденсации)
Допустимость купюр к приемке	Принимает 96% купюр. Приемник не принимает купюры: а. Очень грязные, очень старые, сильно поврежденные или выцветшие б. Помятые или с загнутыми уголками, или если вы резко потяните купюру назад.

1. Разъемы








Инструкция по эксплуатации T102 модели.

(1) Включите кресло через 5сек после его подключения к сети.

(2) Вложите купюру в купюроприемник, установленный в правом подлокотнике кресла. Массаж начнется автоматически сразу после того, как вы вложите необходимое количество купюр, при этом спинка и отделение для ног автоматически займут позиции, заданные в настройках. Во время массажа пользователи могут менять массажные функции с помощью панели управления в правом подлокотнике или продолжать вкладывать купюры, чтобы продлить время массажа.

(3) Во время массажа, его действия отражаются на дисплее. Массаж автоматически остановится по истечению проплаченного времени, при этом спинка кресла и отделение для икр автоматически вернутся в исходное положение.

-  (1) Нажмите "Режим" для настройки параметров
-  (2) С помощью кнопок вверх/вниз для выбора параметров
- 
-  (3) Нажмите ОК для подтверждения параметров
-  (4) После установки настроек. Нажмите "Сброс", чтобы выйти из режима настроек. Если в течение 10 сек вы не нажмете на кнопку "Сброс" система автоматически выйдет из режима настроек.

2. Функции купюроприемника

	Номер	Функция	Отображение на Дисплее
Кнопка "Режим"	1	Установка значения достоинства купюры	Set Money Мин. 1; Маск. 20
	2	Установка времени для заданного значения достоинства купюры	Set Time Мин. 1; Маск. 30
	3	Установка угла наклона отделения для ног после начала массажа	Set Leg Angle 0 (самый низкий); 1,2,3,4 (более высокий)
	4	Установка угла наклона спинки кресла после начала массажа	Set Back Angle 0 (самый высокий); 1,2,3,4 (более низкий)
	5	Сумма, накопленная в купюроприемнике	Total Money Макс. 99999
	6	Общее время уже произведенного креслом массажа	Total Time Маск. 999:59 (999 ч., 59 мин.)

3. Использование кнопок панели управления.

Кнопка	Функции массажа	Характеристика массажа	Статус на дисплее
	Автоматический массаж	Авто массаж режим 1	Auto I
	Автоматический массаж	Авто массаж режим 2	Auto II
	Выбор области массажа	Точечный массаж заданной области	
		Частичный массаж маленькой области	
		Общий массаж верхней части тела	
	Вид массажа	Разминание	
		Похлопывание	
		Разминание и похлопывание	
		Шиацу	
		Постукивание	

Кнопка	Функции массажа	Характеристика массажа	Статус на дисплее
	Воздушный массаж	Возможность настройки интенсивности массажа	Air Strength
	Вибромассаж	Возможность настройки интенсивности массажа	
	Скорость	5 уровней интенсивности	Speed
	Ширина	3 уровня широты массажа	Width
	Поднять отделение для ног		
	Опустить отделение для ног		
	Поднять спинку		
	Опустить спинку		

